




Tegaderm™

Soluciones para el Cuidado I.V.

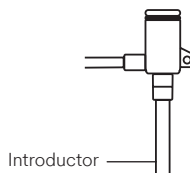

Guía de producto

Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™ I.V.
Aseguramiento Avanzado 1685
para Introduectores

Apósitos Transparentes 3M™ Tegaderm™ I.V. Aseguramiento Avanzado 1685

El apósito está diseñado para brindar un cuidado excepcional del paciente mediante el aseguramiento avanzado del sitio, estabilización del catéter y remoción gentil con la piel.

*También disponible con
protección antimicrobiana*

Borde reforzado

Tecnología diseñada para reducir el levantamiento de los bordes.

Barrera estéril resistente al agua que protege de contaminantes externos*

Película transparente altamente transpirable.

Tira adhesiva de aseguramiento con hendidura

Promueve una aplicación consistente y un mejor aseguramiento del sitio / estabilización del catéter. Las perforaciones permiten que la tira adhesiva se adapte alrededor de otros dispositivos.

Corte profundo ampliado

Permite que los lúmenes del catéter se adapten mejor y permanezcan en su sitio. Las perforaciones permiten que el corte se adapte alrededor de catéteres de gran volumen.

Visibilidad del sitio

El apósito transparente permite la identificación temprana de complicaciones en el sitio de inserción.

Aseguramiento del sitio / estabilización del catéter

Diseñado para proteger el sitio de inserción y reducir el movimiento o desplazamiento del catéter.

Aplicación consistente





El diseño del marco permite una correcta, fácil y estandarizada aplicación.

Comodidad del paciente

Se puede usar de manera segura hasta por 7 días, reduciendo potencialmente el número de cambios del apósito y reinserciones no programadas del catéter.

*Las pruebas in vitro muestran que la película provee una barrera contra virus de 27 nm o más de diámetro mientras que el apósito permanezca intacto sin fuga de líquido de infusión.

1685

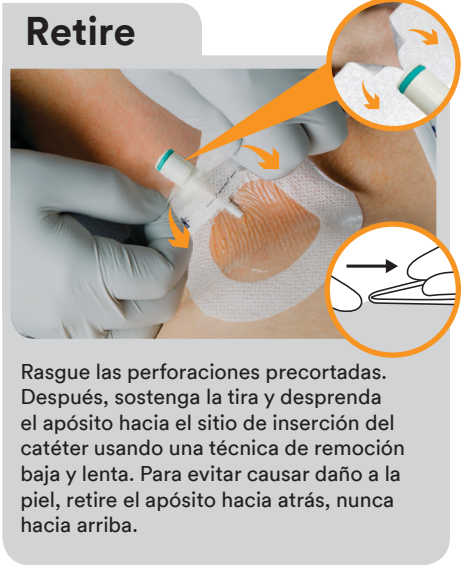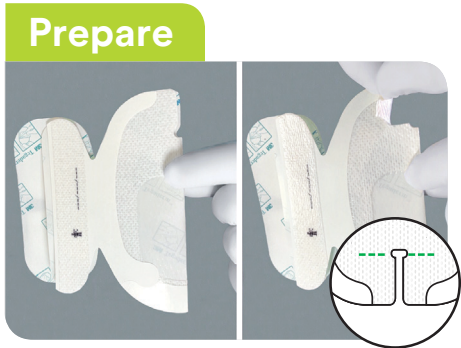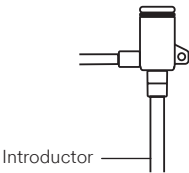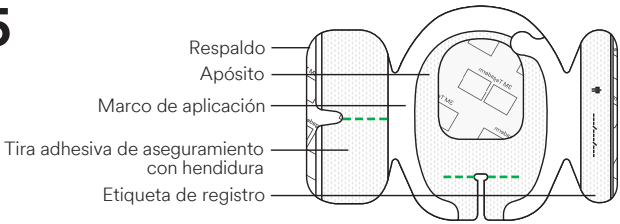

Para más información, consulte las Instrucciones de uso.

Información para pedido

Producto	Modelo	Tamaño del apósito	Unidades por cajita	Cajitas por case
	1685	8.5 cm x 11.5 cm 3 1/2 in x 4 1/2 in	50	4



3M Cuidado de la Salud
División de Soluciones Médicas
2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA

Por favor recicle.
3M y Tegaderm son marcas registradas de 3M.
© 3M 2019. Todos los derechos reservados.
70-2011-7177-7