

Cutimed® Siltec Plus – Siltec B


Espuma trilaminar superabsorbente con lámina de silicona.

Descripción

Espuma trilaminar hidrocélular de poliuretano con tiras superabsorbentes termofusionadas que retienen y evaporan el exudado. La cara en contacto con la herida consta de una lámina perforada de silicona que permite que el apósito se mantenga en su lugar, mientras se fija o coloca el apósito secundario o vendaje de fijación, permitiendo un retiro atraumático.

Características

- Permite alivio de presión, especialmente en puntos de apoyo o bajo dispositivos médicos.
- Excelente capacidad de absorción.
- Altamente confortable, proporciona un excelente acolchado y protección de la herida. Absorbe verticalmente los fluidos, absorción eficiente y segura aún bajo compresión. Permite el paso de exudado altamente viscoso.
- Cambio atraumático y sin dolor.
- Bajo riesgo de irritación de la piel y alergias.
- Protege la piel circundante y las nuevas capas de células en epitelización.
- Sella los bordes de la herida (Versión con bordes adhesivos de silicona).
- Previene la maceración.
- No usar soluciones oxidantes, hipoclorito o peróxido de hidrógeno.
- Cambiar el apósito cuando el exudado se encuentre máximo a 1 cm de los bordes (por el diseño especial de saturación del apósito, es posible visualizar a través de la capa superior translúcida).
- Recortable, permite optimizar su uso.
- Permite reposicionar (reajutable).
- Vigencia 3 años.
- Libre de látex.

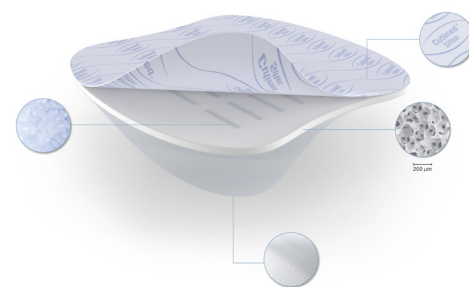

Esterilización

- Óxido de etileno.

Almacenamiento

- Almacenar en lugar seco, limpio y sin exposición directa al sol, máximo 25°C

Recomendaciones de uso

- Indicado para heridas con bajo a alto nivel de exudado como: úlceras venosas o arteriales, úlceras por presión, úlceras por pie diabético, heridas quirúrgicas, injertos de piel, laceraciones o abrasiones.
Indicado para prevenir lesiones por presión, generando alivio de presión en puntos de apoyo o bajo dispositivos médicos.

Composición

- Material de film: Poliuretano azul claro y elástico.
- Material de espuma: Espuma de poliuretano hidrófila, porosa, flexible y confortable.
- Espesor: 5+/- 0,75mm. Versión B con bordes adhesivos de silicona.: 3 +/- 0,5mm.
- Material de lámina de silicona: Lámina de poliuretano delgada cubierta con silicona grado médico por un lado. Peso: 175g / m² +/- 35g / m².
- Adhesivo absorbente: Transparente termofusionado.

**LATEX
FREE
FORMULA**

Cutimed® Siltec Plus – Siltec B

Espuma trilaminar súper absorbente con lámina de silicona.

Procedencia Certificaciones de calidad

Alemania

ISO 13485 / CE

Presentaciones Cutimed® Siltec B - Siltec Plus

Código	Descripción	Unidad de Venta
73284-00001	Siltec B 12.5 cm x 12.5cm	Caja x 10 Unidades
73284-00004	Siltec B 22.5cm x 22.5cm	Caja x 5 Unidades
73288-00001	Siltec Plus 10cm x 10cm	Caja x 10 Unidades

