


Dafilon®

FICHA TÉCNICA

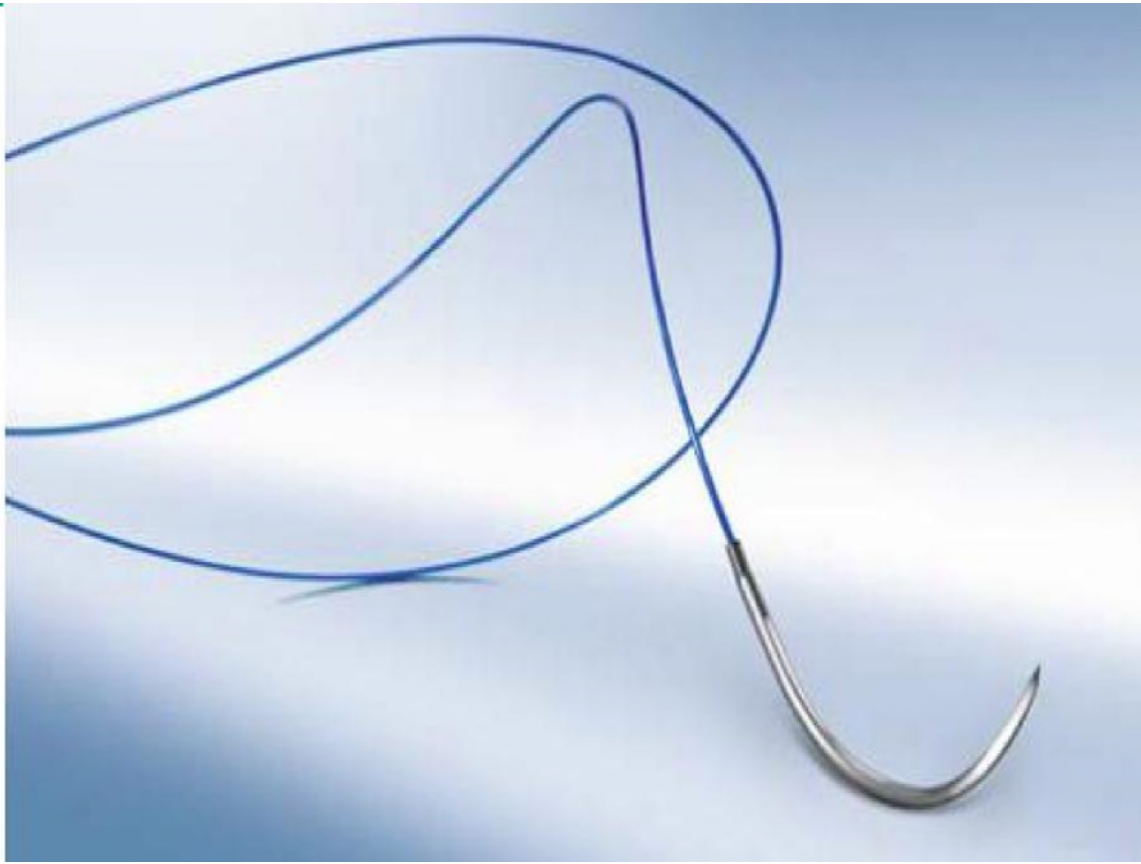

1 DESCRIPCIÓN

Sutura quirúrgica esteril monofilamento no absorbible de poliamida, está disponible teñida en azul (poliamida 6/66) con copper phthalocyanine (c.l. 74160), o en negro (poliamida 6/6) teñida con el tinte hematein logwood black c.l. 75290, para que pueda ser localizada fácilmente, aunque también se encuentre sin teñir con lo mantiene su color beige natural.

2 INDICACIONES

Sutura Dafilon® está indicada básicamente para suturas dérmicas y cirugía de cavidad oral (USP de 5 a 6/0); se usa en microcirugía, cirugía microvascular, oftalmología y neurocirugía (USP de 8/0 a 11/0).

3 ESPECIFICACIONES

Material:	Poliamida
Recubrimiento:	Sin recubrimiento
Estructura:	Monofilamento
Colores:	Azul, negro o sin teñir
Tamaños USP:	5 (métrica 7) a USP 11/0 (métrica 0,1)
Perfil de absorción:	No absorbible
Esterilización:	Radiación gamma /Óxido de etileno (microcirugía 8/0 a 11/0)

4 ALMACENAMIENTO / EMPAQUE / VIDA ÚTIL

Almacenamiento:	Bajo techo en un lugar limpio y seco No someter a las temperaturas superiores de 50°C
Vida útil:	5 años
Empaque:	DDP, PEEL CE, CAS esterilización por radiación gamma (RG) BSA, LP, BLT esterilización por óxido de etileno (OE)
Fabricado por:	B. Braun Surgical S.A., España


5 CERTIFICACIONES

La sutura Dafilon® tiene la marca CE y está clasificada como un producto de clase IIa y III (microcirugía).



6 ETIQUETADO

Descripción	
1.	Aguja
2.	Descripción de sutura
3.	Nombre de producto
4.	Longitud de la hebra
5.	USP y EP tamaño
6.	Código de lote
7.	Fecha de caducidad
8.	Ver instrucciones de uso
9.	No re-esterilizar, uso único
10.	Código de material
11.	Método de esterilización
12.	Cantidad unidades

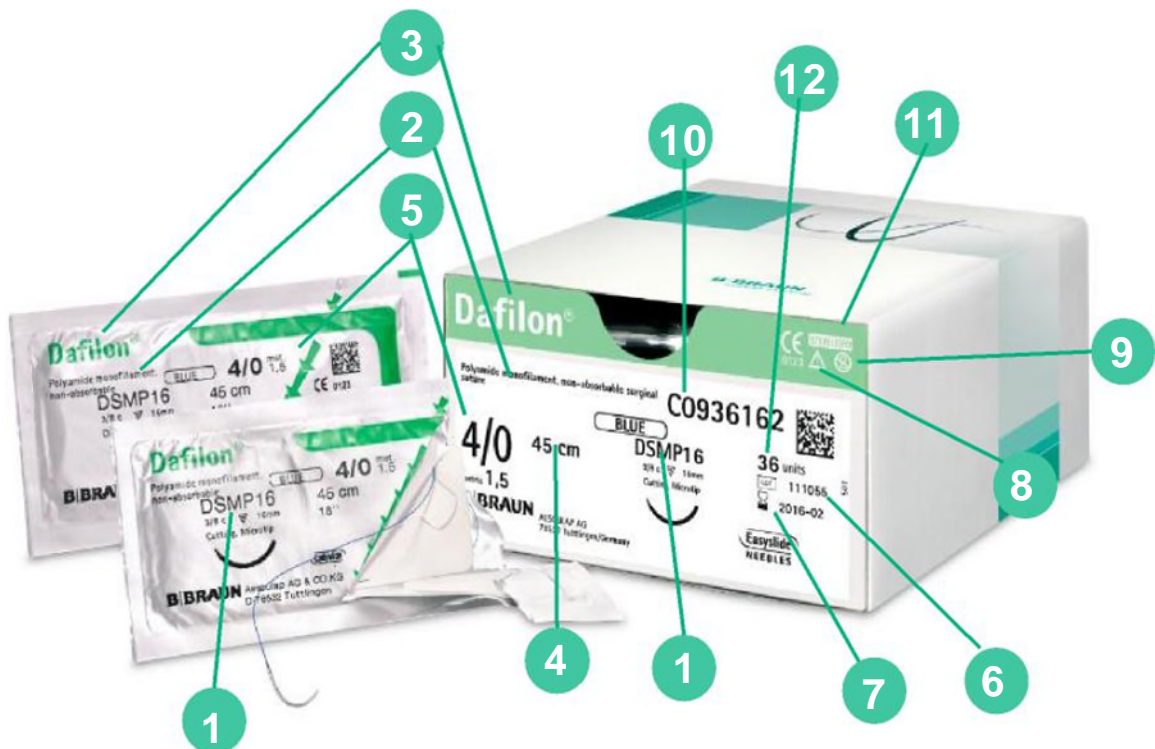



Nomenclatura de agujas B. Braun

A		B		C		12	D	
Angulo de aguja o curvatura		Cuerpo de aguja		Punta de aguja		Longitud de la aguja	Agujas especiales	
S	1/8 de circulo	R	redondo	C	corte corto 	La distancia entre	ff	de cuerpo extrafino
V	1/4 de circulo	S	cortante	T	tipo trocar 	la punta de la aguja y su fin,	f	de cuerpo fino
D	3/8 de circulo	G	trapezoidal	S	tipo esternón 	medido a lo largo de	s	de cuerpo pesado
H	1/2 de circulo	L	con micro grabado	N	punta roma 	la aguja en mm.	ss	de cuerpo extrapesado
F	5/8 de circulo		tipo lanceta	B	con protección 		v	break-off
G	recta			MP	de precisión 		b	aguja negra
P	curvatura progresiva			M	micropunta 			
J	hook o gancho			m	micro aguja 			
SK	aguja tipo esquí			mV	micro vascular 			

Ejemplo:

H	R	C	26	b
---	---	---	----	---

HRC26 → ½ circulo, aguja redonda con punta de corte corta, 26 mm de longitud, negra.

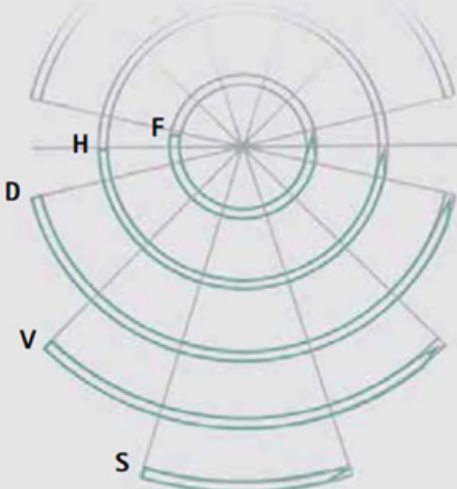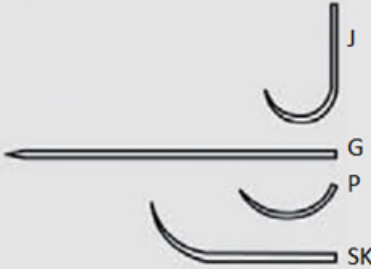Angulo de aguja o curvatura	Otras
 <p>S 1/8 de circulo V 1/4 de circulo D 3/8 de circulo H 1/2 de circulo F 5/8 de circulo</p>	 <p>G recta P curvatura progresiva J hook o gancho SK aguja tipo esquí</p>