


Indicaciones

Placas base de sistema de 2 piezas, versión convexa.

Cada placa de base se debe conectar con bolsas de tipo Proxima 2 que están disponibles como bolsas cerradas, drenables (con pinza) o bolsas de Urostomía.

Placa base de 2 piezas Convexa - Disponible en diámetros de 40, 50, 60 y 80 mm

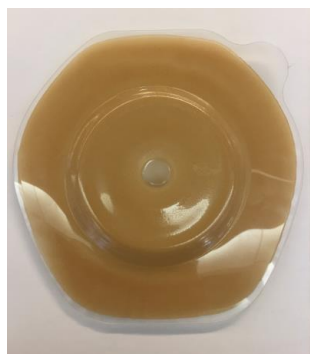

Características

- Una selección de placas de base con diferentes diámetros en versiones pre-cortadas o cortadas para adaptarse a las expectativas de los Ostomizados
- Protector de la piel: protección hidrocoloide completa de la piel
- Convexo: convexidad incorporada para estomas retraídos para evitar fugas - Profundidad de 8 mm
- Seguridad incrementada
- Sistema de bloqueo fácil de usar: un clic audible le asegurará que la bolsa está fijada al anillo. Para retirar la bolsa, levante la palanca de bloqueo y retire suavemente la bolsa de la brida, empezando por la parte superior.
- Placa base fácil de limpiar.
- Mayor comodidad y discreción
- Forma hexagonal del protector de la piel
- Placa base de bajo perfil, incorporando presillas

Componentes

- Material : Protector de lanzamiento
Papel protector recubierto de silicona que se extiende más allá de la encía.
- Protector de piel : Una capa de goma de hidrocoloide (componentes principales: poliisobutileno, carboximetilcelulosa, pectina)
- Recubrimiento protector de película transparente que se extiende más allá de la encía.
- Hexagonal: Sistema de acoplamiento
- Anillo de soporte: polietileno
- Cerradura: poliamida
- Convexidad: copo limero de estireno.
- No látex no PVC.

Referencias

77050A	Proxima 2 convex base plate CTF 50/ 17-30	5 x caja
77060A	Proxima 2 convex base plate CTF 60/ 15-40	5 x caja
77080A	Proxima 2 convex base plate CTF 80/ 17-60	5 x caja